



*Es Biología Molecular
desarrollada por y para
Científicos*

Catálogo de Productos y Soluciones



Es Biología Molecular desarrollada por y para Científicos

Durante 15 años T4 ha sido la única empresa en México, Latinoamérica y el resto del mundo especializada en desarrollar, manufacturar y distribuir reactivos y demás soluciones 360° en Biología Molecular consolidándose como un pilar estratégico de desarrollo biotecnológico y científico.

Fundada en 2011 por y para científicos, T4 promueve a través de su modelo único de colaboración científica, una forma transparente de hacer ciencia e innovación.

El equipo científico de T4 desarrolla y manufactura en México bajo estándares internacionales y de exportación para que sin importar el reto, se generen soluciones rápidas, eficientes y acordes a la realidad económica de todos nuestros usuarios en el sector público y privado.

En T4 producimos en pesos y vendemos en pesos, por lo que somos independientes de los cambios y fluctuaciones a nivel internacional, esto es la verdadera soberanía científica.

Nuestro Compromiso

Desde hace 15 años, establecimos 3 pilares fundamentales como soporte a nuestro compromiso:

*Tiempos de
Entrega Rápidos*

*Soporte
Científico*


*Productos
Eficientes,
Certificados
Internacionalmente
y Hechos 100% en
México*

Certificaciones y Distintivos

Todos nuestros procesos están soportados con un Sistema de Gestión de Calidad certificado internacionalmente por la **ISO 9001:2015**, así como con el distintivo **Hecho en México** que respaldan el origen nacional de nuestros desarrollos y nuestro compromiso con la innovación y el fortalecimiento de la industria científica y tecnológica del país. También, en el ámbito internacional, orgullosamente formamos parte de la **Oligonucleotide Therapeutics Society**.



En T4, nos especializamos en ofrecer soluciones 360° para el equipamiento de todo su laboratorio de Biología Molecular y facilitamos las herramientas para que usted genere sus propios resultados; también ponemos nuestra infraestructura y experiencia analítica a su disposición.

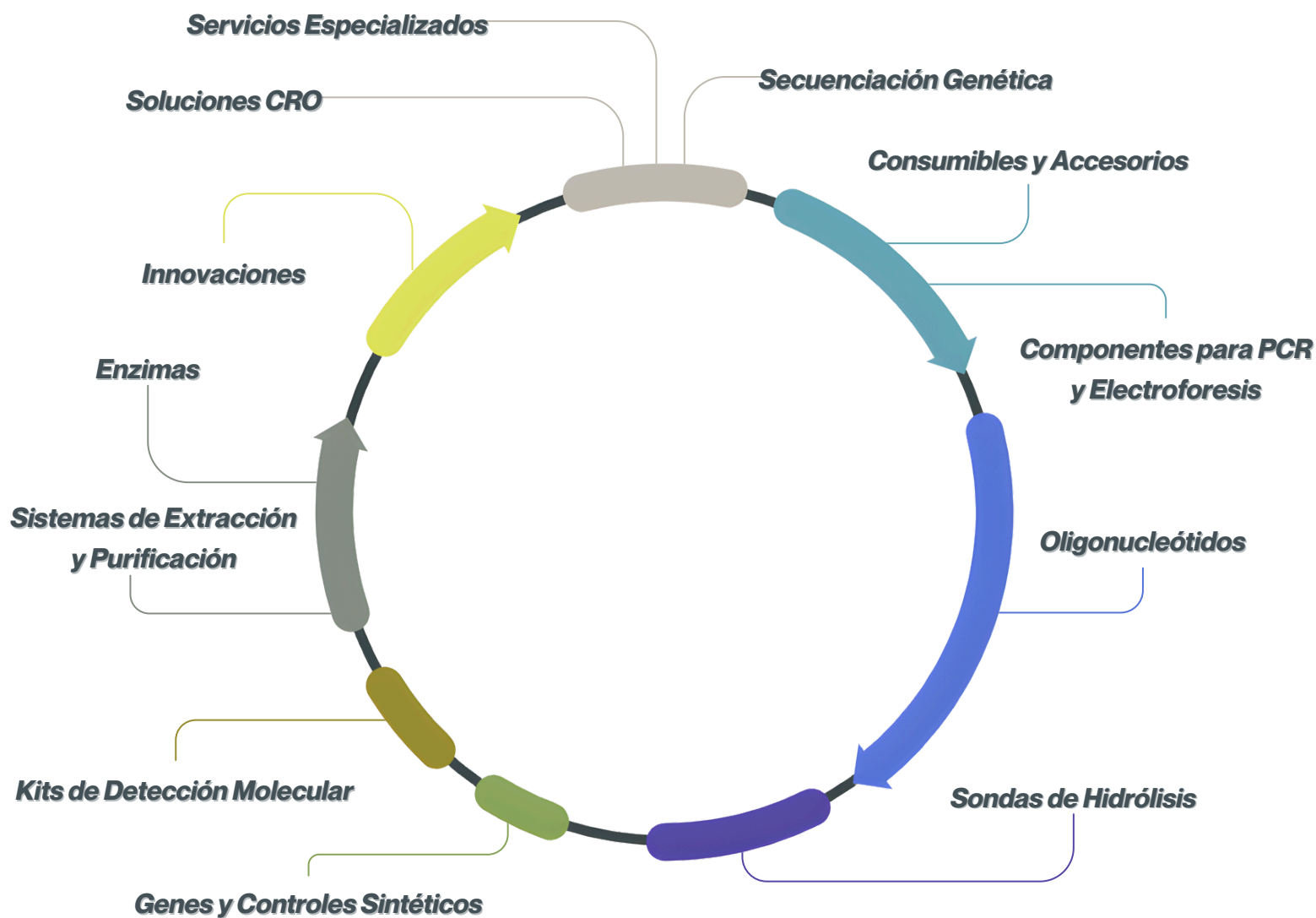

¿Por qué elegir los insumos T4?

Compatibilidad Garantizada

El ecosistema de T4 es compatible con todas las plataformas de Biología Molecular.

Simplificación Logística

Un solo proveedor; una sola factura y un solo tiempo de entrega para todo el flujo de trabajo (desde la extracción hasta el resultado).

Nuestros Productos y Soluciones

Categoría	Página
Oligonucleótidos	/ 6
PrimeReady™: Secuencias Presintetizadas con Entrega Inmediata	/ 9
PrimeReady Med™: Secuencias estandarizadas con utilidad en Sector Salud	/ 10
PrimeReady Control™: Controles Sintéticos	/ 11
Sondas de hidrólisis para qPCR	/ 12
Manifiesto StarQ™: La Ciencia Detrás de la Fluorescencia	/ 12
StarQ™ Plus: Sondas de Hidrólisis	/ 14
StarQ™ Prime: Sondas con Quencher Interno	/ 15
StarQ™ Polaris: Sondas cortas con estabilizador	/ 16
Genes Sintéticos	/ 17
T4Bricks™: Fragmentos de doble cadena (dsDNA)	/ 17
T4Gene™: Genes clonados en vector	/ 18
Enzimas de alto rendimiento	/ 19
GIGAscript™	/ 19
Sistemas de Extracción y Purificación de Ácidos Nucleicos	/ 20
NextPure™: ViroBac / Vet / Plant / High Plant	/ 21
NextPure™ Xpress: Plant / Vet / Flex	/ 21
NextPure™ Blood / Tissue / Cell Culture	/ 21
NextPure™ SizeSelect	/ 21
Kits de Detección Molecular	/ 23
Sentinel™	/ 23
Sentinel™ Agro	/ 25
Sentinel™ Food	/ 26
Sentinel™ Vet	/ 27
Otros Reactivos Esenciales	/ 28
Componentes para PCR y Electroforesis	/ 28
Consumibles, Accesorios y Equipamiento	/ 28
Distribuciones de Otras Marcas	/ 29
LGC Biosearch®	/ 29
Genes2Life®	/ 29
Secuenciación Genética: Lectura precisa del código biológico	/ 31
Servicios Especializados: Resultados con validez científica y rigor analítico	/ 32
Soluciones CRO: Diseño y validación de ensayos a la medida	/ 33
Innovaciones: El ADN de nuestra tecnología	/ 34



Productos

Oligonucleótidos



Los primers de ADN y ARN son el insumo estándar en un laboratorio de Biología Molecular.

Desde el año 2011, hemos sintetizado más de 20 millones de nucleótidos los cuales han servido como motor en el desarrollo científico en sectores como Agricultura, Veterinaria, Inocuidad Alimentaria, Pandemia de SARS-CoV-2 y demás brotes epidemiológicos.

Todos nuestros primers se sintetizan bajo condiciones de baja salinidad, disminuyendo su costo. Pero sabemos que algunos ensayos dependen de las necesidades del mismo. Elige la purificación requerida de acuerdo a tu ensayo o contacta a tu colega científico T4.

SKU	Escala	Mínimo / Máximo de bases	High Pure	Purificaciones Disponibles		
				Cartucho	HPLC	PAGE
OE-002	25 nmol	2 / 35	✓			
OE-005	50 nmol	2 / 59	✓	✓		
OE-010	100 nmol	2 / 99	✓	✓	✓	✓
OE-020	200 nmol	2 / 120		✓	✓	✓
OE-100	1000 nmol	2 / 120			✓	✓

Aplicación	Purificación Recomendada				
	Desalado	High Pure	Cartucho	HPLC	PAGE
Adaptadores para NGS				✓	✓
Edición génica: mRNA, siRNA y gRNA			✓		✓
PCR y ensayos estándar de Biología Molecular	✓	✓			
Primers y sondas para qPCR				✓	
Sondas de captura para NGS				✓	

Modificaciones Químicas



Porque no todos experimentos son iguales, contamos con más de 100 modificaciones disponibles a elegir, si no encuentra la que busca, contacte a su colega científico T4.

Categoría	Modificación	Posición Disponible
Amino	Amino C3	Extremo 5'
	Amino C6	Extremo 5' / Interna
	Amino C6 dT	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Amino C7	Extremo 3'
	Amino C12	Extremo 5'
	Amino Uni-Link™	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	AOP-Amino Uni-Link™	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Azul de Metileno	Extremo 5'
	Biotina	Extremo 5' / Extremo 3'
	Biotina dT	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Biotina-TEG	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Biotina (dual)	Extremo 5'
	Biotina PC	Extremo 5'
	Destibiotina-TEG	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
Agentes de marcaje no radiactivos	Digoxigenina	Extremo 5' / Extremo 3'
	2'-O-metilación (2'- O -Me)	Interna
	Ácidos Nucleicos Bloqueados (LNA)	Interna
	Inosina (I)	Interna
	RNA (U)	Interna
Bases especiales	CAL Fluor® Gold 540	Extremo 5'
	CAL Fluor® Orange 560	Extremo 5'
	CAL Fluor® Red 610	Extremo 5'
	Cy3®	Extremo 5'
	Cy5®	Extremo 5'
	Cy5.5®	Extremo 5'
	Cy7®	Extremo 5'
	FAM	Extremo 5' / Extremo 3'
	FAM dT	Interna
	HEX	Extremo 5'
	HEX dT	Interna
	JOE™	Extremo 5'
	MIKE™	Extremo 5'
	ROX™	Extremo 5'
Fluoróforos	TAMRA™	Extremo 5' / Extremo 3'

Modificaciones Químicas



Categoría	Modificación	Posición Disponible
Fluoróforos	TET™	Extremo 5'
	Texas Red™	Extremo 5'
	Texas Red™ X	Extremo 5'
	Quasar™ 570	Extremo 5' / Extremo 3'
	Quasar™ 670	Extremo 5'
	Quasar™ 705	Extremo 5'
Fosforilación	Fosfato	Extremo 5' / Extremo 3'
Modificaciones con mercaptanos (tioles)	Tiol C3 S-S	Extremo 3'
	Tiol C6 S-S	Extremo 5' / Extremo 3'
	Tiol C6 S-S dT	Interna
	Ditiol Serinol	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
Colesterol	Colesterol	Extremo 3'
	Colesterol-TEG	Extremo 3'
Metacrilato	Acilato	Extremo 5'
Modificaciones relacionadas con reacciones click	Hexinil	Extremo 5'
	DBCO (Difenilciclooctino)	Extremo 5'
Spacers y estabilizadores	Spacer 18	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Spacer 9	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Spacer C6	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Spacer C3	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	dSpacer	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	Spacer 9 PC	Extremo 5' / Interna / Extremo 3'
	4BOND™ (MGB®)	Extremo 3'
Tiosustitución	Enlace Fosforotioato (*)	Interna
Quenchers	BHQ1™ (Black Hole Quencher™)	Extremo 5' / Extremo 3'
	BHQ1™ dT	Interna
	BHQ2™	Extremo 3'
	BHQ2™ dT	Interna
	BHQ3™	Extremo 3'
	BBQ® 650 (BlackBerry® Quencher)	Extremo 5' / Extremo 3'
	BBQ® 650 dT	Interna
	DABCYL	Extremo 3'
	DABCYL dT	Interna



PrimeReady™ es una línea de oligonucleótidos universales presintetizados, purificados por HPLC y con rendimiento garantizado, listos para entrega inmediata y diseñados para las aplicaciones más comunes en biología molecular.

SKU	Nombre	Secuencia
PR-UNI-001	16S rRNA Universal Primer (Forward)	AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
PR-UNI-002	16S rRNA Universal Primer (Reverse)	ACGGCTACCTTGTACGACTT
PR-UNI-003	M13 Forward (-20)	GTAAAACGACGGCCAGT
PR-UNI-004	M13 Forward (-41)	CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC
PR-UNI-005	M13 Reverse (-27)	CAGGAAACAGCTATGAC
PR-UNI-006	M13 Reverse (-48)	AGCGGATAACAATTTACACAGG
PR-UNI-007	Oligo (dT)12	TTTTTTTTTTTTT
PR-UNI-008	Oligo (dT)15	TTTTTTTTTTTTTTTTT
PR-UNI-009	Oligo (dT)18	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
PR-UNI-010	Oligo (dT)20	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
PR-UNI-011	SP6 Promoter	TACGATTTAGGTGACACTATAG
PR-UNI-012	SP6 Upstream	ATTTAGGTGACACTATAG
PR-UNI-013	T3 Promoter	AATTAACCCTCACTAAAGGG
PR-UNI-014	T7 Promoter	TAATACGACTCACTATAGGG
PR-UNI-015	T7 Terminator	GCTAGTTATTGCTCAGCGG
PR-UNI-016	Random primer (6mer)	NNNNNN
PR-UNI-017	Random primer (7mer)	NNNNNNN
PR-UNI-018	Random primer (8mer)	NNNNNNNN

PrimeReady™ Med

Secuencias estandarizadas con utilidad en Sector Salud

Cat. PR-MED-000



PrimeReady™ Med es la línea especializada de oligonucleótidos y sondas de hidrólisis prediseñados y presintetizados, enfocada en Sector Salud de México y el mundo y ha sido desarrollada para laboratorios que requieren precisión y resultados inmediatos sin los tiempos de espera de una síntesis personalizada.

Secuencias Validadas. Basadas en los protocolos de referencia para la detección de múltiples patógenos y marcadores genéticos nacionales (InDRE), internacionales (OMS, OPS, CDC) y publicaciones científicas de alto valor.

Certificado de Prueba de Funcionalidad. Somos la única empresa a nivel global en entregar, junto con cada primer y sonda, un certificado que garantiza la operatividad total del sistema. Antes de que cualquier set salga de nuestro laboratorio, realizamos mediante verificaciones cruzadas una qPCR de control.

Un Universo de Blancos a su Disposición. Contamos con una biblioteca de cientos de diseños validados para salud humana, animal y vigilancia epidemiológica. Nuestro portafolio abarca desde controles internos esenciales hasta los patógenos más críticos:

- **Vigilancia Respiratoria.** Panel completo de Influenza (A, B, H1N1 pdm, H3, linajes Victoria/Yamagata), RSV (A y B), Adenovirus, Metapneumovirus y una amplia gama de Coronavirus humanos (229E, OC43, HKU1, NL63).
- **Enfermedades Transmitidas por Vector.** Sets específicos para ZIKV (Zika), CHIKV (Chikungunya), MAYV (Mayaro), OROV (Oropouche) y Rickettsia.
- **Patógenos de Especialidad.** Brucella spp., Bordetella, Leptospira, Sarampión, Rubéola y Mpox.
- **Controles Críticos de Calidad.** Controles internos como RNasa P (H-RNasaP) en múltiples configuraciones de primers y sondas.

Si está en sus manos, es porque ya lo vimos amplificar en las nuestras.

Si requiere la lista completa de blancos disponibles, o necesita el diseño para una región genética específica, consulte a su Colega Científico T4. Estamos listos para enviarle el inventario técnico completo o trabajar con usted en una solución a la medida.

RUO

Uso en Investigación
Científica

Todos los productos de la línea PrimeReady™ Med se suministran bajo la clasificación RUO (Research Use Only). Son herramientas destinadas exclusivamente a la investigación y desarrollo, validación de protocolos moleculares y estudios epidemiológicos.

PrimeReady™ Control

Controles Positivos Sintéticos de Alta Estabilidad

Cat. PR-CTL-500



El control positivo es el punto de referencia que valida que todo el sistema, desde la extracción hasta la amplificación, ha funcionado correctamente. Con PrimeReady™ Control ofrecemos una línea de estándares sintéticos diseñados para proporcionar una cuantificación exacta y una seguridad biológica total, eliminando la necesidad de manejar patógenos vivos o muestras clínicas infecciosas.

Adaptamos nuestra ingeniería a la naturaleza de su blanco:

Controles de Doble Cadena (Tecnología T4Brick™): Utilizando nuestra arquitectura de bloques de ADN, creamos controles de doble cadena ultra-estables. Estos fragmentos sintéticos son ideales para estandarizar ensayos de DNA, calibrar equipos y servir como moldes de alta fidelidad que no se degradan con facilidad.

Controles de Cadena Sencilla (ADN/ARN): Diseñados específicamente para simular la estructura genética del virus o blancos de cadena sencilla, permitiendo evaluar la eficiencia de la retrotranscripción (RT) y la amplificación en un solo paso.

Categoría	Propósito Técnico
Patógeno	Validación de sensibilidad (LoD) y curvas de cuantificación viral.
Endógeno	Monitoreo de la eficiencia de extracción y calidad de la muestra humana.
Housekeeping	Normalización de datos y control de carga en ensayos de expresión.

Contamos con una biblioteca de controles listos para su uso inmediato, cubriendo los marcadores de referencia y patógenos más críticos en la normativa internacional:

RNasa P (Humana)
 β -Actina (Beta-Actina)
GAPDH
18S rRNA
SARS-CoV-2 (Genes N/E/RdRp)

Influenza A/B
Zika / Chikungunya / Dengue
Mycobacterium tuberculosis
HIV / HCV
Bordetella pertussis

Si requiere la lista completa de blancos disponibles, o necesita el diseño para una región específica, consulte a su Colega Científico T4.

RUO

Uso en Investigación
Científica

Todos los productos de la línea PrimeReady™ Control se suministran bajo la clasificación RUO (Research Use Only). Son herramientas destinadas exclusivamente a la investigación y desarrollo, validación de protocolos moleculares y estudios epidemiológicos.

Sondas de Hidrólisis para qPCR

Manifiesto StarQ™: La Ciencia Detrás de la Fluorescencia



En el universo de la detección molecular cuantitativa, la amplificación es solo la mitad de la historia. La verdadera certidumbre nace en el momento en que una sonda se hibrida con su blanco y libera una señal.

*En T4, entendemos que esa señal debe ser pura, potente y absoluta es por esto que **StarQ™**, un proceso patentado de **Sincronización de Fluorescencia Dinámica** con el que garantizamos que tu molécula está presente y es funcional.*

Tres Dimensiones de Precisión

*Hemos evolucionado la síntesis de sondas de hidrólisis en tres niveles de sofisticación para adaptarnos a la complejidad de cada desafío: **StarQ™ Plus**, **StarQ™ Prime** y **StarQ™ Polaris**.*

Estándar de Oro

*El equilibrio perfecto entre costo y eficiencia lo da **StarQ™ Plus**, siendo la base de confianza para los flujos de trabajo de rutina que exigen resultados consistentes.*

Silencio del Quencher Interno

*Cuando el diseño de la sonda aumenta, hay ruido, es por ello que en **StarQ™ Prime** incorporamos la tecnología de un bloqueador interno que absorbe la fluorescencia residual de manera mucho más eficiente.*

La Cumbre de la Especificidad

*Ya sean diseños cortos o para los retos más extremos de detección, en las sondas **StarQ™ Polaris** utilizamos nuestra tecnología **4BOND™**. Esta molécula permite estabilizar sondas más cortas que se unen con una fuerza superior a su blanco.*

El Mapa Espectral Adaptado a StarQ™

Multiplexing de Alta Resolución



Nuestra tecnología *StarQ™* se expande a través de una arquitectura universal de colores diseñada para la máxima compatibilidad instrumental. Nuestra selección de fluoróforos permite la configuración de ensayos multiplex de alta complejidad, garantizando que cada canal de detección reciba una señal pura y diferenciada.

Fluoróforo	ABS (nm)	EM (nm)	Purificación	Quencher
FAM	495	520		
FAM dT	495	520		
TET™	521	536		
CAL Fluor® Gold 540	522	544		BHQ1™ BBQ®
JOE™	529	555		
MIKE™	530	550		
HEX	535	556		
HEX dT	535	556		
CAL Fluor® Orange 560	538	559		
Quasar™ 570	548	566		
Cy3®	549	566	Dual HPLC	
TAMRA™	557	583		
ROX™	586	610		BHQ2™
CAL Fluor® Red 610	590	610		
Texas Red™	597	616		
Texas Red™ X	597	616		
Cy5®	646	669		
Quasar™ 670	647	670		
Quasar™ 705	690	705		BHQ2™ BHQ3™
Cy5.5®	694	711		
Cy7®	756	779		

StarQ™ Plus

Cat. SQ-PLS-01



Dentro de nuestro ecosistema T4, *StarQ™ Plus* es nuestra línea de sondas de hidrólisis diseñada para quienes exigen una ejecución perfecta en cada vial, representando la pureza de la síntesis molecular.

El Estándar de Oro

Las sondas *StarQ™ Plus* son sometidas a nuestro proceso de purificación dual y validación de rendimiento cuántico. No son solo sondas; son herramientas de precisión calibradas para ofrecer:

Estabilidad Térmica Superior: Diseñadas para resistir los ciclos térmicos más exigentes sin pérdida de señal.

Pureza Certificada por HPLC: Verificada para asegurar que solo las secuencias completas y correctamente marcadas lleguen a su vial.

Compatibilidad Universal: Su química está optimizada para brillar en cualquier plataforma de qPCR, maximizando la eficiencia y asegurando una curva de amplificación limpia desde el primer ciclo.

StarQ™ Prime

Cat. SQ-PRM-01



La línea StarQ™ Prime de T4 se define por un concepto clave: Fluoróforo y Quencher Interno Sincronizado.

El Problema: El Ruido de Fondo

En ensayos de biología molecular de alta sensibilidad, el enemigo oculto es el ruido de fondo. Una sonda tradicional suele liberar una pequeña cantidad de fluorescencia residual incluso cuando no hay amplificación. StarQ Prime™ fue diseñada para permitir personalizar los puntos de control de energía para maximizar la relación señal-ruido.

La Solución: El Silencio del Quencher Interno

La tecnología Prime incorpora un apagador dentro de la secuencia (generalmente entre las bases 9 y 12), reduciendo la distancia física entre el fluoróforo y el apagador.

Proximidad Cuántica: Al estar tan cerca, permite una absorción de energía (FRET) mucho más eficiente, manteniendo la sonda indetectable hasta el momento exacto de la hidrólisis.

Doble Candado: En una configuración con doble quencher, se optimiza la sonda para aplicaciones donde se requiere evitar la extensión enzimática o ajustar la estabilidad térmica.

El Resultado: Ingeniería de Contraste Superior

Al reducir el ruido de fondo, la relación Señal/Ruido (SNR) se dispara.

Detección Temprana: Al no tener ruido basal, el equipo detecta el aumento de fluorescencia varios ciclos antes.

Límite de Detección (LoD): Es la herramienta ideal para muestras donde hay muy pocas copias del blanco (como detección temprana de virus o trazas de patógenos en alimentos).

StarQ™ Polaris

Cat. SQ-POL-01



La Cumbre de la Especificidad

En el complejo universo del genoma, existen regiones donde las sondas tradicionales simplemente no pueden hibridarse con la firmeza necesaria. StarQ™ Polaris es nuestra solución T4 de ingeniería avanzada, diseñada para ofrecer una estabilidad inquebrantable.

La ciencia detrás de Polaris reside en la incorporación del 4BOND en el extremo 3'. Esta molécula se aloja en el surco menor de la doble hélice que estabiliza la unión de la sonda con su blanco.

La fuerza del 4BOND™

El uso de 4BOND™ reduce la energía libre de Gibbs necesaria para la unión, lo que permite que el sistema detecte con una resolución que las sondas tradicionales simplemente no alcanzan.

Hiper-estabilización: Esta modificación eleva artificialmente la T_m de la sonda. Esto significa mayor estabilidad de unión bajo diversas condiciones de reacción.

Reducción de Ruido: La unión ultra-específica y el diseño compacto minimizan cualquier señal inespecífica, entregando la línea basal más limpia posible, incluso en las muestras más complejas.

Detección de SNPs Inigualable: La capacidad de discriminar entre secuencias con diferencias de una sola base es crítica en la genotipificación de enfermedades, resistencia a antibióticos o variabilidad de cepas.

Diseño en Regiones Difíciles: Permite colocar sondas en lugares del genoma donde antes era imposible por la baja T_m .

Señal Explosiva: Al ser más corta, la liberación del fluoróforo por la polimerasa es más eficiente y rápida.

Genes Sintéticos

De la secuencia digital a la realidad biológica



En la era de la biología sintética, la investigación ya no se limita a lo que encontramos en la naturaleza; se expande hacia lo que podemos diseñar. En T4, le otorgamos el poder de imprimir sus ideas con absoluta precisión. Ya sea que necesite una secuencia corta para un ensayo específico o un gen completo optimizado para expresión, nuestras soluciones de síntesis son el puente entre su diseño bioinformático y la realidad.

T4Bricks™

Los Bloques de Construcción Molecular

Cat. BRK-01

T4Bricks™ es nuestra línea de fragmentos de ADN de doble cadena diseñados para ser los ladrillos de su investigación. Ideales para laboratorios que realizan clonación, ensamblaje de genes o ingeniería de vías metabólicas.

Versatilidad Total: Fragmentos de hasta 3 kb listos para métodos de ensamblaje como Gibson o Golden Gate.

Agilidad: La forma más rápida de obtener secuencias personalizadas sin pasar por procesos de clonación tradicionales.

T4Gene™

Ingeniería Genética a Medida

Cat. GEN-01



Cuando su proyecto requiere la síntesis de un gen completo, T4Gene™ es la solución integral. No solo entregamos una secuencia; entregamos una herramienta biológica lista para ser utilizada.

Optimización de Codones: Adaptamos su secuencia para maximizar la expresión proteica en el organismo de su elección (*E. coli*, levaduras, mamíferos).

Clonación Personalizada: Con acceso a más de 150 plásmidos especializados, entregamos su gen sintetizado en el vector de su preferencia, verificado al 100% mediante secuenciación de Sanger o Nanopore.

Complejidad sin Barreras: Capacidad para sintetizar secuencias ricas en GC, repetitivas o estructuras secundarias complejas.

Enzimas de Alto Rendimiento

GIGAscript™: Potencia enzimática para dominar el genoma

Cat. GAS-HS-01, GAS-RT-01, GAS-OS-01



Presentamos GIGAscript™, nuestra división de enzimas de alto rendimiento diseñada para superar los límites de la PCR.

GIGAscript™ Aptamer Hot Start: Precisión activada por diseño.

Nuestra Taq polimerasa de última generación utiliza tecnología de activación por aptámeros. A diferencia de los métodos químicos o por anticuerpos, los aptámeros garantizan una especificidad absoluta a temperatura ambiente, liberando la actividad enzimática solo al alcanzar la temperatura de desnaturalización.

- Cero amplificación inespecífica: Resultados limpios desde el primer ciclo.
- Preparación Flexible: Permite el montaje de reacciones a temperatura ambiente sin degradación.

GIGAscript™ RT: Fidelidad en la conversión de RNA.

Diseñada para la síntesis de cDNA con una termoestabilidad y procesividad que desafía a los estándares globales

- Resistencia Térmica: Capaz de operar a temperaturas elevadas para desestabilizar estructuras secundarias complejas del RNA.
- Sensibilidad Extrema: Convierte incluso las trazas más bajas de RNA en moldes de DNA listos para ser cuantificados.

GIGAmaster™ One-Step: Sincronía absoluta. Potencia en un solo paso.

Es nuestra mezcla maestra all-in-one que fusiona toda la potencia de nuestra tecnología GIGA en un sistema simplificado, diseñado para laboratorios que exigen la máxima eficiencia.

Con GIGAmaster™ cada componente ha sido afinado para trabajar en perfecta armonía:

- Ingeniería Enzimática Dual: Integra nuestras GIGA™ RT de alta termoestabilidad y GIGA Taq en una proporción áurea. Esto garantiza que la transición del RNA al DNA y su posterior amplificación ocurra en un flujo continuo, optimizando la detección de blancos críticos.
- Matriz de Resiliencia: El buffer incorporado en GIGAmaster™ ha sido diseñado para ser universal y que trabaje con muestras de origen agropecuario, ambiental o clínico, la reacción mantiene su linealidad y eficiencia de detección.

Sistemas de Extracción y Purificación de Ácidos Nucleicos



Sistemas de Extracción NextPure™: La ingeniería de la pureza al servicio de su detección

La familia NextPure™ utiliza tecnología de partículas magnéticas de alta afinidad, diseñada para transformar muestras complejas en ácidos nucleicos de ultra-pureza. Nuestra arquitectura de kits permite una transición fluida desde la lisis hasta la elución, garantizando la máxima recuperación de ácidos nucleicos, eliminando inhibidores complejos y entregando moldes ultra-puros, listos para los análisis más exigentes.

Beneficios Clave

- *Protocolos Ultra-Rápidos:* Reducción significativa de los tiempos de preparación en comparación con métodos basados en centrifugación.
- *Alto Rendimiento:* Recuperación superior de fragmentos cortos de ácidos nucleicos, críticos para la detección de cargas virales bajas.
- *Eco-Friendly:* Minimiza el uso de solventes orgánicos peligrosos y reduce la generación de residuos plásticos asociados a las columnas de filtración.

NextPure™: Estandarización y fidelidad para matrices críticas

NextPure™ ViroBac

Nuestra solución núcleo para la captura de DNA/RNA viral y bacteriano. Asegura que incluso las cargas genéticas más bajas sean concentradas para una identificación precisa.

NextPure Vet™: Formulado para los retos de la sanidad animal (sangre, tejido auricular, fluidos orales), permitiendo un procesamiento robusto en entornos de bioseguridad.

NextPure Plant™: Optimizado para el procesamiento ágil de muestras vegetales estándar, ideal para rutinas de tamizaje fitosanitario de alto flujo.

NextPure High Plant™: Diseñado para protocolos que requieren el procesamiento de grandes volúmenes de tejido vegetal o matrices de alta complejidad (semillas, raíces, granos procesados).



NextPure™ Xpress: Máximo rendimiento en tiempos récord

Diseñada para laboratorios de alta demanda que requieren resultados inmediatos sin comprometer la calidad. Los protocolos Xpress™ optimizan los pasos de lavado para una purificación acelerada y eficiente.

NextPure™ Xpress Plant: Especializado en la extracción rápida de DNA vegetal, venciendo la resistencia de paredes celulares y carbohidratos.

NextPure™ Xpress Vet: Flujo optimizado para muestras pecuarias (suero, sangre, fluidos), ideal para vigilancia epidemiológica a gran escala.

NextPure™ Xpress Flex: Nuestra solución modular más versátil. Un sistema abierto diseñado para adaptarse a protocolos personalizados y automatización a medida de cada proyecto.

Fidelidad genómica para investigación aplicada

NextPure™ Blood: Extracción de alta eficiencia desde sangre total, garantizando la eliminación de inhibidores como la hemoglobina.

NextPure™ Tissue: Potente sistema de lisis para tejidos animales y biopsias, asegurando una liberación completa del material genético.

NextPure™ Cell Culture: Diseñado para la pureza absoluta en líneas celulares, proporcionando DNA listo para aplicaciones de secuenciación y expresión.

NextPure™ SizeSelect: Purificación selectiva en el diseño de librerías

NextPure™ SizeSelect es la solución definitiva para procesos de clean-up y selección de tamaño en aplicaciones de PCR y NGS. Utiliza la química de partículas magnéticas NextPure™ para la purificación de ácidos nucleicos y la eliminación selectiva de adaptadores, dímeros y nucleótidos no incorporados, obteniendo como resultado fragmentos de DNA del tamaño exacto requerido para su aplicación.

¿Dudas sobre cuál es el kit ideal para su matriz? Hable con su Colega Científico T4.

La matriz es el mayor reto en la extracción. Permítanos asesorarle sobre qué línea de NextPure™ ofrece el mejor rendimiento y pureza para sus muestras específicas.



Guía de Selección NextPure™: De la Matriz al Resultado

Matriz de Origen	Kit Recomendado	SKU	Atributo Clave de Desempeño
Virus y Bacterias (Hisopos, fluidos, medios)	NextPure ViroBac™	NXP-VIB-01	Concentración de cargas ultra-bajas para identificación.
Sangre Total (Fresca o congelada)	NextPure Blood™	NXP-BLP-01	Remoción total de hemoglobina e inhibidores hemáticos.
Tejidos y Biopsias	NextPure Tissue™	NXP-TIP-01	Lisis profunda para liberación de DNA genómico íntegro.
Cultivos Celulares	NextPure Cell™	NXP-CPO-01	Pureza de grado secuenciación (NGS ready).
Muestras Pecuarias (Suero, muesca, fluidos orales)	NextPure Vet™	NXP-VET-01	Resiliencia ante matrices animales complejas.
Vegetales y Semillas (Escala estándar)	NextPure Plant™	NXP-PLA-01	Neutralización de polifenoles y polisacáridos.
Grandes Volúmenes Vegetales / Granos	NextPure High Plant™	NXP-HIP-01	Máximo rendimiento en muestras de gran tamaño.
Flujos de Alta Velocidad (Agro/Vet)	NextPure Xpress™ (Plant / Vet)	NXP-XPP-01 / NXP-XPV-01	Protocolos de lavado reducido para resultados inmediatos.
Protocolos Personalizados	NextPure Xpress Flex™	NXP-XPF-01	Arquitectura modular para automatización a medida.
Preparación de NGS / Post-PCR	NextPure SizeSelect™	NXP-SIS-01	Clean-up y selección precisa de tamaño de fragmento.

¿Dudas sobre cuál es el kit ideal para su matriz? Hable con su Colega Científico T4.

La matriz es el mayor reto en la extracción. Permitanos asesorarle sobre qué línea de NextPure™ ofrece el mejor rendimiento y pureza para sus muestras específicas.

Sentinel™

Kits de Detección Molecular



Sentinel™ es la línea de soluciones moleculares diseñada para la detección temprana de patógenos en entornos productivos.

Arquitectura de Libertad

A diferencia de los sistemas cerrados y costosos, Sentinel™ está diseñado para la realidad del laboratorio moderno.

Universalidad: Optimizado para cualquier equipo de qPCR del mercado.

Sincronía Óptica: Al eliminar la dependencia de colorantes de referencia pasivos (ROX), permitimos una lectura pura de la fluorescencia, maximizando la capacidad del equipo.

Capacidad Nominal (Reacciones): Sentinel se comercializa por Número de Reacciones (50, 125, 250 reacciones para tiempo real; 75 reacciones para punto final).

Precisión Integrada

Cada kit Sentinel™ ha sido diseñado bajo una estructura de tres pilares que asegura la máxima confiabilidad en el laboratorio:

Potencia de Amplificación (GIGAscript™ Inside): El motor de nuestros kits es nuestras mezclas maestras GIGA Taq™ y GIGA RT. Esta tecnología proporciona la velocidad y sensibilidad necesarias para procesar muestras complejas, permitiendo la detección incluso de las trazas genéticas más bajas.

Nitidez Óptica (StarQ™ Technology): Utilizamos nuestras configuraciones de sondas StarQ™ de alta gama (Prime y Polaris) para entregar señales sin ambigüedades, con líneas de base perfectamente planas y una discriminación de color excepcional en sistemas multiplex.

Controles PrimeReady™ Incluidos: Cada kit incorpora controles positivos sintéticos y controles internos de calidad.

Divisiones Especializadas Sentinel™



Nuestra línea se despliega en tres ejes estratégicos para cubrir toda la cadena de valor:

Sentinel™ Agro: Soluciones enfocadas en la detección de patógenos que afectan la productividad agrícola y la salud de los cultivos, protegiendo el patrimonio fitosanitario.

Sentinel™ Food: Kits especializados para garantizar la inocuidad alimentaria, permitiendo la detección rápida de microorganismos contaminantes en productos procesados y materias primas.

Sentinel™ Vet: Herramientas de vanguardia para la sanidad animal, diseñadas para la vigilancia epidemiológica y la detección de enfermedades infecciosas en ganado y especies de producción.

Certidumbre en cada Reacción

Funcionalidad Certificada: Todos los lotes son validados mediante qPCR antes de ser enviados, garantizando que el sistema sea totalmente operativo.

Soporte Técnico Especializado: Acompañamiento por parte de su Colega Científico T4.

RUO

Uso en Investigación
Científica

Todos los productos de la línea Sentinel™ se suministran bajo la clasificación RUO (Research Use Only). Son herramientas destinadas exclusivamente a la investigación y desarrollo, validación de protocolos moleculares y estudios epidemiológicos.



Diseñada para los desafíos del campo y la fitopatología, la línea Sentinel™ Agro ofrece una detección temprana de hongos, bacterias y virus fitopatógenos. Gracias a GIGAscript™, este kit es capaz de superar los inhibidores naturales presentes en suelos y tejidos vegetales, permitiendo identificar amenazas antes de que los síntomas sean visibles y la cosecha se vea comprometida.

Ideal para: Certificación de semillas, análisis de suelos y monitoreo de cultivos de alto valor.

Patógenos del Agave

Patógeno / Blanco	Nombre del Kit	SKU	No. Reacciones
<i>Fusarium oxysporum</i>	Sentinel FO	SEN-FOX-01	50 / 125 / 250
<i>P. carotovorum</i> (subsp. <i>carotovorum</i>)	Sentinel PCC	SEN-PCC-01	50 / 125 / 250
<i>F. verticillioides</i>	Sentinel FV	SEN-FVE-01	50 / 125 / 250
<i>Cercospora agavicola</i>	Sentinel CA	SEN-CAG-01	50 / 125
<i>Thielaviopsis paradoxa</i>	Sentinel TP	SEN-TPA-01	50 / 125

Patógenos de Berries y Cultivos de Exportación

Patógeno / Blanco	Nombre del Kit	SKU	No. Reacciones
<i>Fusarium oxysporum</i>	Sentinel FO	SEN-FOX-01	50 / 125 / 250
<i>Neopestalotiopsis</i> spp.	Sentinel Neopestalotia	SEN-NEO-01	50 / 125 / 250
<i>Phytophthora capsici</i>	Sentinel PC	SEN-PCA-01	50 / 125 / 250
<i>P. carotovorum</i> (subsp. <i>carotovorum</i>)	Sentinel PCC	SEN-PCC-01	50 / 125 / 250
<i>Cercospora agavicola</i>	Sentinel CA	SEN-CAG-01	50 / 125
<i>Thielaviopsis paradoxa</i>	Sentinel TP	SEN-TPA-01	50 / 125

Sentinel™ Food



Sentinel™ Food está diseñado para laboratorios de control de calidad y terceros autorizados que requieren la máxima sensibilidad en matrices complejas (cárnicos, lácteos, vegetales y superficies).

Inocuidad Avanzada y Detección de OGMs

Patógeno / Blanco	Nombre del Kit	SKU	No. Reacciones
<i>Escherichia coli</i> O157	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Salmonella</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Shigella</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Listeria monocytogenes</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Staphylococcus aureus</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>Vibrio cholerae</i>	Sentinel Food Safe / Sentinel Lac	SEN-FSA-01 / SEN-LAC-01	50 / 125 / 250
<i>E. coli</i> STEC	Sentinel STEC	SEN-ECS-01	50 / 125 / 250
Hepatitis A	Sentinel HEP	SEN-HEP-01	50 / 125 / 250
Hepatitis E	Sentinel HEP	SEN-HEP-01	50 / 125 / 250
OGMs (35S / NOS)	Sentinel GMO	SEN-GMO-01	50 / 125 / 250

RUO

Uso en Investigación
Científica

Todos los productos de la línea Sentinel™ se suministran bajo la clasificación RUO (Research Use Only). Son herramientas destinadas exclusivamente a la investigación y desarrollo, validación de protocolos moleculares y estudios epidemiológicos.



En el sector veterinario y de producción animal, la velocidad de respuesta es la diferencia entre un evento aislado y una crisis sanitaria. Sentinel™ Vet es nuestra línea de soluciones moleculares de alta especialidad, diseñada para laboratorios de diagnóstico veterinario y centros de producción que requieren una detección precisa, sensible y ultra-rápida de los patógenos que amenazan la rentabilidad y la salud animal.

Sistemas de Diagnóstico Molecular para Sanidad Animal y Vigilancia Epidemiológica

Sector	Patógeno / Blanco	Nombre del Kit	SKU	No. Reacciones
Avicultura	Influenza A H5N1	Sentinel Influenza A	SEN-IAH-01	50 / 125 / 250
	Influenza H5 / H7	Sentinel Influenza H5/H7	SEN-I57-01	50 / 125 / 250
	Virus New Castle	Sentinel NC	SEN-NCA-01	50 / 125 / 250
Acuicultura	Virus de la Mancha Blanca (WSSV)	Sentinel MB	SEN-MBL-01	50 / 125 / 250
	Virus de la Necrosis Hepatopancreática	Sentinel AHPND	SEN-NHE-01	50 / 125 / 250
	Virus del Herpes de Ostreidos	Sentinel HvOS	SEN-HOS-01	50 / 125 / 250
Vectores	Zika	Sentinel V3	SEN-V03-01	50 / 125 / 250
	Chikungunya	Sentinel V3	SEN-V03-01	50 / 125 / 250
	Dengue	Sentinel V3	SEN-V03-01	50 / 125 / 250

RUO

Uso en Investigación Científica

Todos los productos de la línea Sentinel™ se suministran bajo la clasificación RUO (Research Use Only). Son herramientas destinadas exclusivamente a la investigación y desarrollo, validación de protocolos moleculares y estudios epidemiológicos.

Otros Reactivos Esenciales

Soporte integral para el flujo de trabajo molecular



En T4 entendemos que una detección perfecta depende de cada detalle, desde la calidad del guante hasta la pureza de la agarosa. Para ofrecer una solución de 360°, actuamos como integradores de componentes críticos, seleccionando y validando una línea extendida de reactivos y consumibles que complementan nuestro ecosistema.

Si está en nuestro catálogo, es porque cumple con el estándar de confianza T4.

Componentes para PCR y Electroforesis

Ofrecemos una selección de reactivos fundamentales para la manipulación y análisis de ácidos nucleicos, ideales para laboratorios que requieren abastecimiento continuo de alta pureza:

dNTPs Mix: Nucleótidos de ultra-alta pureza (>99%) para síntesis de cDNA y PCR de alta fidelidad.

Marcadores de Tamaño (Ladders): Estándares de peso molecular para DNA y RNA con bandas nítidas y fáciles de identificar.

Colorantes de Ácidos Nucleicos: Alternativas seguras al Bromuro de Etidio, como SYBR Green y otros tintes de alta sensibilidad.

Agarosa Grado Molecular: Para una resolución superior en geles de electroforesis, libre de DNasas y RNasas.

Agua Grado Biología Molecular: Libre de nucleasas y tratada para las aplicaciones más sensibles.

Consumibles, Accesorios y Equipamiento

Ponemos a su disposición los materiales necesarios para que su laboratorio nunca se detenga, garantizando compatibilidad total con nuestros sistemas StarQ™, Sentinel™ y GIGAscript™:

Plásticos de Alta Calidad: Tubos de microcentrifuga, viales de baja retención, tiras con tapas ópticas y placas para qPCR.

Guantes y Protección: Guantes de nitrilo libres de polvo, optimizados para sensibilidad táctil y protección contra agentes químicos.

Accesorios de Laboratorio: Racks, puntas con filtro (Aerosol Resistant) y material volumétrico de precisión.

Equipamiento Seleccionado: Cámaras de electroforesis, fuentes de poder y transiluminadores LED, seleccionados por su robustez y desempeño constante.

Diferenciadores del Catálogo Extendido

No somos solo proveedores; somos científicos. Cada producto del catálogo extendido ha sido probado en nuestras propias manos.

Consolide sus órdenes de compra. Desde sus sondas personalizadas StarQ™ hasta las puntas con filtro, todo en un solo lugar.

Disponibilidad Inmediata. Mantenemos stock estratégico de los insumos esenciales para que su laboratorio no sufra por tiempos de entrega internacionales.

Distribuciones de Otras Marcas

Alianzas Estratégicas: Distribución y Respaldo Global



En T4, nuestra misión es conectar a los laboratorios de México y Latinoamérica con la innovación global más disruptiva. Por ello, hemos consolidado alianzas estratégicas con líderes mundiales cuya tecnología complementa y potencia nuestro ecosistema. Más que un distribuidor, somos su aliado técnico para la implementación de estas plataformas.



Tecnología de frontera, soporte local

Como aliados de Biosearch, ponemos a su alcance las herramientas que definieron la PCR moderna. Desde el diseño de oligos hasta plataformas de alto rendimiento, Biosearch es sinónimo de confiabilidad industrial.

Innovación en diagnóstico y salud pública

Nuestra alianza con Genes2Life nos permite ofrecer soluciones integrales para la detección de patógenos humanos y vigilancia epidemiológica con un enfoque de innovación y accesibilidad.



En T4, no solo le entregamos un producto, le entregamos la experiencia técnica para dominarlo.

Si tiene dudas sobre el alcance de las soluciones de Biosearch o Genes2Life, o necesita una recomendación específica para su proyecto, contacte directamente a su Colega Científico T4. Estamos aquí para traducir la tecnología global en resultados locales.



Soluciones

Secuenciación genética

Lectura precisa del código biológico



Ofrecemos servicios de secuenciación adaptados a la escala y profundidad que su proyecto requiera. Ya sea que necesite confirmar una variante específica o explorar un genoma completo, T4 es su nodo de acceso a la tecnología de lectura de ácidos nucleicos más avanzada.

Secuenciación Sanger: El estándar de oro para la verificación de fragmentos de DNA, análisis de plásmidos y confirmación de mutaciones puntuales. Resultados de alta fidelidad con tiempos de respuesta optimizados.

Secuenciación de Nueva Generación (NGS): Soluciones de alto rendimiento para proyectos de genómica compleja, metagenómica, RNA-seq y vigilancia genómica a gran escala.

¿Por qué secuenciar con T4?

Asesoría en el Diseño: Le ayudamos a elegir la plataforma y profundidad de lectura adecuada para sus objetivos de investigación o detección.

Control de Calidad Riguroso: Cada muestra es evaluada antes de ingresar al flujo de secuenciación para asegurar resultados óptimos.

Análisis de Datos: No solo entregamos archivos; le ayudamos a interpretar la información biológica relevante.

¿Tiene un proyecto de secuenciación en puerta? Hable con su Colega Científico T4.

Servicios Especializados

Resultados con validez científica y rigor analítico



T4 ofrece una infraestructura de laboratorio de vanguardia para ejecutar análisis críticos con los más altos estándares de calidad. Nuestros servicios especializados permiten a productores, empresas y centros de investigación obtener datos precisos para la toma de decisiones estratégicas.

Servicio	Aplicación y Alcance
Identificación de Rasgos de Interés Productivo	Utilizamos qPCR para la detección de marcadores genéticos asociados a características fenotípicas de alto valor (rendimiento, resistencia, calidad). Ideal para programas de selección asistida y mejoramiento genético en los sectores Agro y Vet.
Detección Certificada de Patógenos Críticos	Garantizamos la seguridad de su cadena de suministro mediante la detección de patógenos en materias primas y productos terminados. Emitimos resultados confiables que respaldan sus protocolos de inocuidad alimentaria y bioseguridad animal.
Análisis de Eventos Genéticamente Modificados (OGM)	Determinamos la presencia de secuencias reguladoras P35S (Promotor 35S) y T-NOS (Terminador NOS) en granos, harinas y productos procesados. Un servicio esencial para el cumplimiento de normativas de etiquetado y exportación, asegurando la trazabilidad de sus productos.
Caracterización de Comunidades Microbianas (Metagenómica)	A través de secuenciación masiva (NGS), exploramos la diversidad microbiológica de sus muestras (suelo, agua, tracto digestivo). Esta solución permite entender la dinámica de las comunidades microbianas y su impacto en la salud o la productividad de sus sistemas biológicos.
Gestión Integral de Muestras (Prep & Qubit)	Libere a su personal del trabajo operativo. Ofrecemos el servicio completo de: - Extracción y Purificación - Cuantificación por Fluorometría (Qubit): Medición exacta de la concentración de ácidos nucleicos, garantizando la viabilidad de cualquier ensayo posterior.

Hable con su Colega Científico T4

¿Necesita un presupuesto por volumen o la validación de un protocolo específico para su matriz? Estamos listos para integrar estas soluciones en su flujo operativo.

Soluciones CRO (Contract Research Organization)



Diseño y Validación de Ensayos a Medida

Nuestra unidad de Servicios CRO ofrece soluciones de laboratorio de extremo a extremo, ideales para empresas y centros de investigación que buscan análisis de alta complejidad con la garantía de expertos en biología molecular.

Desde el concepto genético hasta la validación final

En T4, transformamos necesidades biológicas en herramientas de diagnóstico robustas.

Si su proyecto requiere un ensayo específico que no se encuentra en catálogo, nuestro equipo de bioinformática y validación molecular lo diseña para usted.

Etapas de nuestro Servicio de Desarrollo



Selección de Objetivos

Identificación bioinformática de objetivos genéticos óptimos, garantizando máxima especificidad y cobertura de cepas o variantes.



Diseño de Primers y Sondas

Diseño avanzado de cebadores y sondas con análisis de termodinámica, estructuras secundarias y dímeros.



Estudios de Estabilidad

Pruebas de vida útil y resistencia térmica de los reactivos bajo diversas condiciones de almacenamiento para asegurar su desempeño en campo.



Verificación del Ensayo

Evaluación de parámetros críticos: Límite de Detección (LoD), Linealidad (R^2), Eficiencia de PCR y Reproducibilidad.

¿Tiene una idea que necesita validación científica? Hable con su Colega Científico T4.

Los proyectos de investigación requieren una planificación meticulosa. Permítanos ayudarle a estructurar su fase experimental y convertir sus hipótesis en datos verificables.

Innovaciones

El ADN de nuestra Tecnología

En T4 no solo aplicamos la tecnología existente; la reinventamos. Nuestra división de Investigación y Desarrollo trabaja constantemente en la creación de herramientas moleculares únicas que resuelven las limitaciones de los ensayos tradicionales. Estas innovaciones son el motor que impulsa la precisión y sensibilidad de todo nuestro ecosistema.

Fluoróforo MIKE™

Desarrollado como el homólogo de alta fidelidad para VIC® con un espectro de absorción y emisión en la región amarillo-verde, MIKE® ofrece una eficiencia cuántica superior, siendo totalmente compatible con instrumentos calibrados para VIC®, JOE® y Yakima Yellow®.



Molécula 4BOND™

4BOND™ es nuestra molécula propietaria de estabilización química, actuando como un homólogo de alto desempeño a la tecnología Minor Groove Binder (MGB), que se integra en nuestras sondas StarQ Polaris™.

Metodología de Validación StarQ™

La calidad de una sonda no se mide solo por su secuencia, sino por su comportamiento dinámico. Hemos desarrollado una metodología de validación única para nuestra línea StarQ™:



¿Quiere saber cómo nuestras patentes pueden potenciar su investigación? Hable con su Colega Científico T4

Nuestras innovaciones están listas para ser integradas en sus proyectos personalizados.

15 Años de Ciencia Aplicada, Compromiso y Evolución



Nuestra historia es el respaldo de su futuro.

Hace 15 años, T4 nació con una visión clara: brindar acceso a la biotecnología de alta gama y demostrar que la ciencia de clase mundial puede desarrollarse desde nuestro entorno. Hoy, esa visión se ha transformado en un ecosistema robusto que acompaña a los centros de investigación y control de calidad más importantes del país.

Ciencia Aplicada que Transforma

No nos conformamos con la teoría. Durante estos 15 años, hemos transformado el conocimiento científico en soluciones tangibles. Desde el desarrollo de fluoróforos propios como MIKE™ hasta la creación de la línea Sentinel™, cada paso ha sido impulsado por la necesidad de resolver problemas reales de detección en todos los sectores.

Evolución Constante

La biología molecular se mueve a una velocidad vertiginosa, y en T4 hemos evolucionado a su ritmo. De ser proveedores de insumos, nos hemos convertido en integradores tecnológicos y centros de servicios especializados (CRO). Nuestra evolución es el reflejo de nuestra capacidad de adaptación y nuestra sed de innovación.

El Camino hacia el Futuro

Miramos hacia adelante con determinación. Los próximos años de T4 estarán marcados por la expansión de nuestras fronteras tecnológicas y el fortalecimiento de nuestra comunidad científica. Porque al final del día, nuestra mayor satisfacción es ver cómo su ciencia avanza gracias a nuestra tecnología.

"Quince años no son el final del camino, sino la base sólida sobre la cual seguiremos construyendo la biotecnología del mañana. Gracias por permitirnos ser el motor molecular de su laboratorio. Sigamos evolucionando juntos."





Conectando la Ciencia con Soluciones Reales

Directorio de Soluciones y Contacto

Ventas y Consultoría Comercial

✉ ventas@t4mexico.com

☎ +52 (462) 624 0364

Soporte Científico y Aplicaciones

✉ soporte@t4mexico.com

☎ +52 (462) 624 0364

Servicios Especializados CRO e I+D Para proyectos de secuenciación

✉ secuenciacion@t4mexico.com

Presencia Digital y Ubicación

🌐 www.t4mexico.com

📍 **Oficinas Centrales:** Euquerio Guerrero 278, Irapuato, Guanajuato, México

15 Años de Experiencia en el Mercado Mexicano

Orgullosamente Mexicanos, con Estándares Globales de Calidad.